

C8 : Synthèses d'espèces chimiques organiques.

En chimie organique, une synthèse consiste à produire une espèce chimique au laboratoire.

1 Les étapes d'une synthèse.

Définition Etapes d'une synthèse


Lors d'une synthèse chimique, les étapes à suivre sont généralement : Transformation, Extraction, Purification et Analyse.

A. La transformation chimique.

On mélange les réactifs (et le catalyseur) dans le ballon et on **chauffe à reflux**


1. Colonne de refroidissement
2. entrée d'eau
3. sortie d'eau
4. ballon
5. chauffe ballon

Remarque : On utilise parfois un montage plus simple avec un erlenmeyer dans un bain marie et un réfrigérant à air.

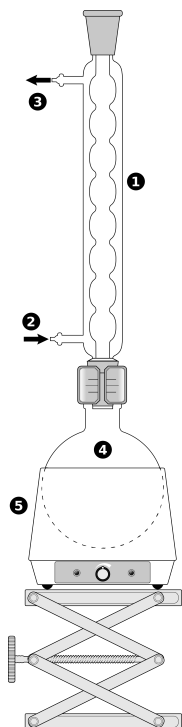

B. Extraction.


- Si le produit à isoler est un solide on utilise une filtration sous vide

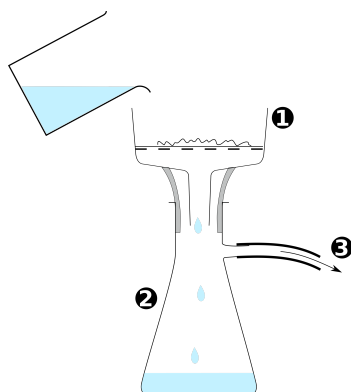

1. Entonnoir Buchner avec papier filtre
2. Fiole à vide
3. Aspiration

- Si le produit à isoler est un liquide on réalise une extraction liquide/liquide avec une ampoule à décanter.

La phase de densité la plus petite est celle qui est au-dessus (c'est généralement la phase organique)

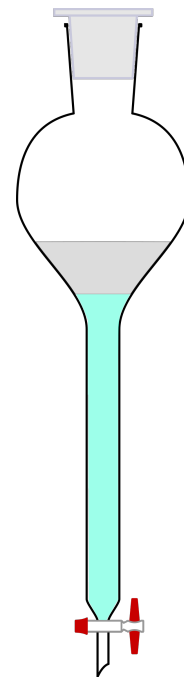


C. Purification.

- Si le produit est un solide on le sépare des impuretés par **recristallisation**. On dissout le solide à chaud, et en refroidissant le solide précipite mais les impuretés restent en solution.

- Si le produit est un liquide, on le purifie par **distillation**.

1. Ballon contenant le liquide homogène
2. Colonne à distiller
3. Colonne de refroidissement
4. Distillat

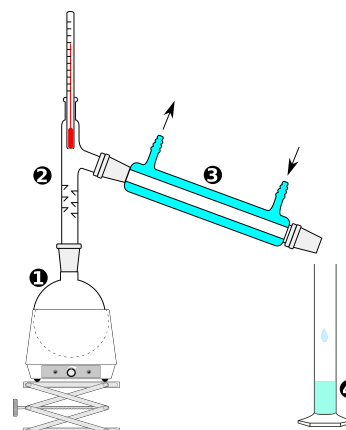

Cette méthode est basée sur la différence de température de vaporisation entre les liquides, celui dont la température de vaporisation est la plus basse est récupéré en premier.

D. Analyse.

Pour contrôler la pureté du produit formé, on peut réaliser :

- Une chromatographie sur couche mince.
- Une mesure de sa température de changement d'état
- Son spectre IR

2 Rendement d'une synthèse.

Définition Rendement d'une synthèse

Le rendement d'une synthèse est le rapport entre la masse de produit obtenue m_{produit} et la masse maximale que l'on obtiendrait pour une réaction totale m_{max} .

$$\mu = \frac{m_{\text{produit}}}{m_{\text{max}}}$$

La masse du produit est obtenue par pesée en fin de synthèse lorsqu'il est sec.

La masse maximale est obtenue par calcul en effectuant un bilan de matière.

Remarque :

- Le rendement est généralement exprimé en pourcentage.
- Un rendement est toujours inférieur à 1 (100%) car:
 1. il y a des pertes de matière lors des différentes étapes de la synthèse.
 2. la transformation chimique n'est pas forcément totale

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Identifier, dans un protocole, les étapes de transformation des réactifs, d'isolement, de purification et d'analyse (identification, pureté) du produit synthétisé.
- ✓ Justifier, à partir des propriétés physico-chimiques des réactifs et produits, le choix de méthodes d'isolement, de purification ou d'analyse
- ✓ Déterminer, à partir d'un protocole et de données expérimentales, le rendement d'une synthèse.
- ✓ Schématiser des dispositifs expérimentaux des étapes d'une synthèse et les légender

C8 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)


Exercice 1: Synthèse d'un savon

Protocole de la synthèse :

- On chauffe pendant trente minutes un mélange de :
 - $2,0 \times 10^{-2}$ mol d'huile de soja (essentiellement constituée d'oléine),
 - $5,0 \times 10^{-2}$ mol d'hydroxyde de sodium (soude),
 - 2,0 mL d'éthanol
- On laisse refroidir le mélange quelques minutes puis on le transvase dans un bécher contenant une solution aqueuse concentrée de sel.
- Le précipité obtenu est filtré, rincé à l'eau salée, séché puis pesé. La masse expérimentale obtenue est $m_{exp} = 10,5$ g.

Équation de réaction:

oléine + soude $\rightarrow$ oléate de sodium (savon) + glycérol

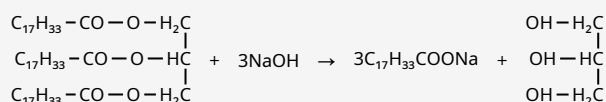

Données:

	Oléine	Soude	Savon
Solubilité dans l'eau	insoluble	soluble	soluble
Solubilité dans l'eau salée	insoluble	soluble	peu soluble
Solubilité dans l'éthanol	soluble	soluble	
masse molaire $g \cdot mol^{-1}$	884	40	304

- Quel montage choisir lors de l'étape 1 et 3 de de protocole ?
- Pourquoi utilise-t-on de l'éthanol dans cette synthèse (ce n'est pas un réactif) dans l'étape 1 ?
- Pourquoi utilise-t-on de l'eau salée dans l'étape 2 ?
- Établir le tableau d'avancement complet de la réaction pour une transformation totale.
- En déduire le rendement de la synthèse.


Exercice 2: Synthèse du paracétamol

Protocole de la synthèse

- Dans un ballon, introduire 10,0 g de para-aminophénol puis 30 mL d'eau et 12,0 mL d'anhydride éthanóïque. Chauffer à reflux pendant environ 20 minutes.
- Refroidir le mélange et le transvaser dans un bécher. Refroidir alors dans un bain de glace : le paracétamol précipite.
- Filtrer sous vide et laver à l'eau glacée. Essorer et sécher sur papier filtre.
- Placer le produit brut humide obtenu à l'étuve à $80^\circ C$: on obtient alors une masse de produit brut sec $m = 10,8$ g.

Équation de réaction:

para-aminophénol + anhydride éthanóïque $\rightarrow$ paracétamol + acide éthanóïque

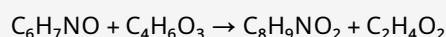

Données :

	aminophénol	paracétamol	anhydride éthanóïque
Masse molaire $g \cdot mol^{-1}$	109	151	102
Température de fusion $^\circ C$	187	170	-73
Solubilité dans l'eau	0,8 g dans 100 g à $20^\circ C$ 8,5 g dans 100 g à $100^\circ C$	1 g dans 100 g à $20^\circ C$ 25 g dans 100 g à $100^\circ C$	
Masse volumique			1,082 $g \cdot mL^{-1}$

- Pourquoi faut-il chauffer à reflux ? Faire un schéma légendé de ce montage.
- Justifier que l'anhydride éthanóïque est liquide à la température du laboratoire.
- Pourquoi y a-t-il apparition d'un précipité lors de l'étape 2 ?
- Calculer les quantités de matière à l'état initial.
- En déduire les quantités de matière à l'état final pour une réaction totale.
- En déduire le rendement de cette synthèse.

Sur une plaque à chromatographie on effectue les dépôts suivants :

- paraminophénol (E) en solution
- paracétamol brut (P) en solution
- paracétamol issu d'un comprimé pharmaceutique (P') en solution

Après révélation, on obtient le chromatogramme suivant:

- Interpréter ce chromatogramme. Le produit obtenu est-il pur ? Comment faut-il procéder pour purifier le paracétamol ?

